

唾液をやさしく吸引できる「SPIT-Q1」レンタルのご紹介



口腔内のダラダラ唾液を  
シッカリ吸ってスッキリ快適に

SPIT-Q1

- POINT 1 静音構造で、静かに運転
- POINT 2 吸引力の調整機能で、快適に吸引
- POINT 3 収集ボトルが、セパレートで自在設置


レンタルだから・・・信頼！便利！安心！

- 必要な時に、必要な期間、使用できるので便利です。
- 1ヵ月からのレンタル利用で、手軽に利用できます。
- トラブル・修理の場合は、代品交換で安心です。
- 長期間のレンタルでも、安心保証のシステムです。

# 口腔洗浄器「スピットQ1」スマートレンタル

## 使い方


- ①電源スイッチを「入」にすると吸引をはじめます
- ②吸引力調節ツマミを回して、吸引圧力を調節してください  
※ 吸引力調節ツマミは、できるだけ「高」側にしてください  
「低」側にすると吸引力が低下して、吸引できない場合があります。

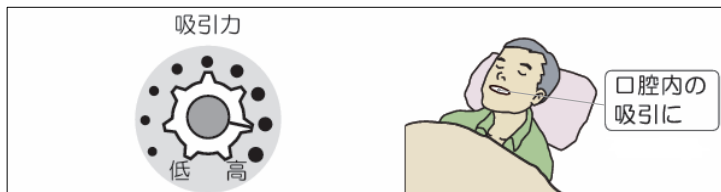

## 仕様

商品名	口腔洗浄器「スピットQ1」
商品番号	00218A00
電源電圧	AC100V (50/60Hz)
消費電力	8W
吸引圧力	0～16kPa (高)
吸引流量	0～4L/分 (高)
収集ボトル容量	1200ml
本体寸法	140(W)×230(D)×155(H)mm
質量	約2.0kg

## レンタルの手順

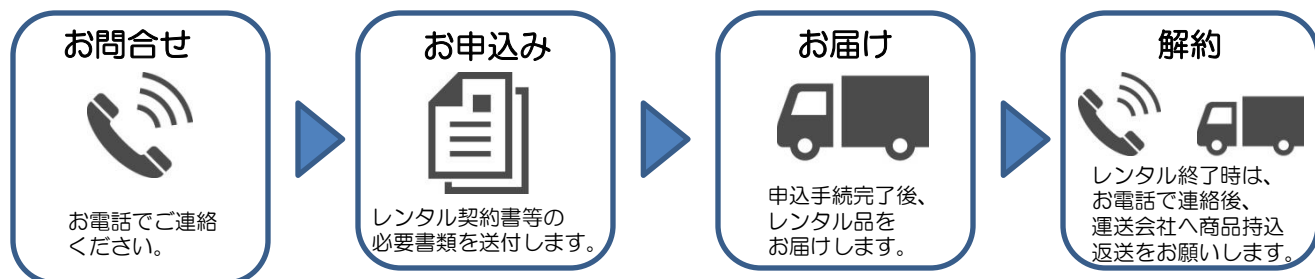

## レンタル費用（弊社へお問い合わせ下さい）

初回レンタル料金	お問合せ下さい	・スピットQ1本体 消耗品 ①吸引ホース②排液カップ ③本体側吸引ホース
2回目以降料金	お問合せ下さい	契約単位は1ヶ月です
送料(納品・回収)	お問合せ下さい	地域により別途見積になります
お支払い方法	ご利用月の前払い	請求書と郵便振込用紙を前月末に送付しますので、ご入金して下さい

## レンタルの保証について

- ①使用中の故障・トラブルについては、無償で交換致します。但し、返送時の送料はお客様負担(元払い)になります。
- ②お客様の過失による機器や部品の破損・故障については、有償となりますのでご了承ください。
- ③追加や予備の備品・消耗品はお客様のご負担となります。  
・吸引ホース、エアフィルタ、収集ボトル等

## ★お試し貸し出しについて

- ①お試しの貸出期間は2週間です。
- ②2週間を超えると有償レンタルになります。
- ③そのままレンタル希望の方は、継続してご使用頂けます
- ④消耗品の費用と返送時の送料は、お客様のご負担になります

お問い  
合せ先

— 医療介護に技術で貢献する —  
**トクソー技研(株)**

〒879-0232 大分県宇佐市大根川318番地  
TEL 0978-33-5595 FAX 0978-33-5596  
MAIL info@amor.co.jp HP <http://www.tokso.net>

レンタルに関するお問い合わせは

**TEL 0978-33-5595**