


離床や徘徊をすばやく通報して事故を防止します！

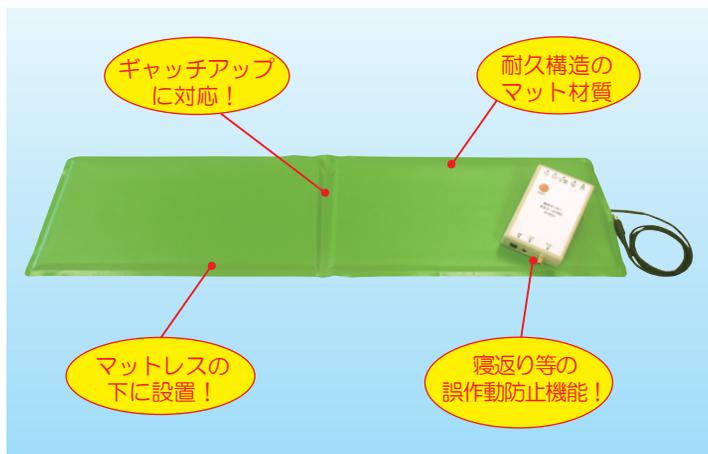

特長

- **センサーマットが大きくなって新登場！**
サイズアップでいろいろな動きを確実に検知します。
 - **マットレスの下に置くのでスッキリ**
ゴワゴワ感がなくてスッキリです。
 - **遅延タイマーで誤作動防止**
寝返り等の誤作動を防止します。
 - **起き上がりやベッド上の移動をすばやく検知**
頭部に置けば起き上がりを素早く検知します。
腰部に置くとベッド上の移動を素早く検知します。
- 【注】本品はナースコール接続やワイヤレスコール接続が別途必要です。

用途例


- **ベッドからの起き上がり（早期検知で転倒防止）**
- **端座位になったとき（早期徘徊防止）**
- **ベッドの両側から出る人（ふむナール対応不可の時）**
- **ふむナールに気づく方（早期徘徊防止）**



マットレスの下の枕下部分や腰部分に置きます。

センサーマットから離れると「起き上がり」や「離床」を離れた場所の介護者にすぐにお知らせします。

使用例

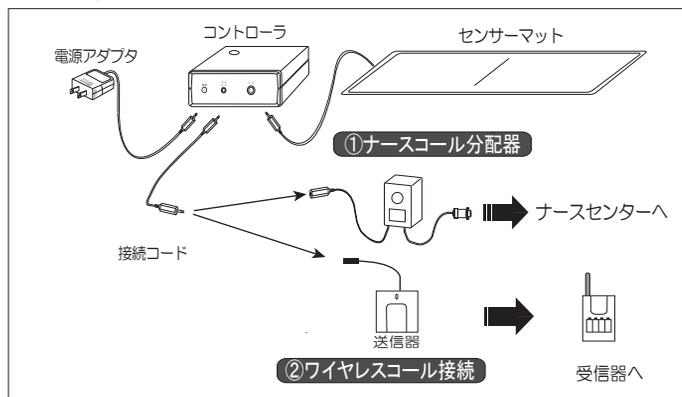

※ナースセンターへの接続は、ナースコール分配器が別途必要です。ナースコールコネクタの形状をご確認ください。

※商品改良のため、仕様および外観を予告なく変更する場合がありますので、ご了承下さい。

仕様

品名	離床センサー「おきナールTW2」
品番	00138B00
電源	ACアダプタ（DC6V）
検知方式	マットから離れると検知して通報
防水性	防水構造
構成	センサーマット、コントローラ、接続コード、ACアダプタ
通報方式	①ナースコール分配器 ②ワイヤレスコール
外形寸法	幅220×長800×厚5mm
質量	コントローラ200g、センサーマット700g
価格	50,000円（税抜）

JANコード 4560346573713

【お問い合わせ先】

一 医療福祉に技術で貢献する一
徳器技研工業(株)

◇本社・工場
〒879-0232 大分県宇佐市大根川318番地
TEL 0978-33-5595 FAX 0978-33-5596
MAIL info@amor.co.jp HP http://tokso.net/