


頬や手などの弱い力でスイッチ操作ができます

顔しか動かせない人が車椅子に乗ってブザーを鳴らしたいとの要望で、このスイッチを作りました。電源不要で、軽い操作でフレキシブルに位置決めができますので、車椅子や移動先でも使えます。ブザーやコール機器、呼び出し用のスイッチとして携帯用会話補助装置、意思伝達装置の入力スイッチとして使えます。

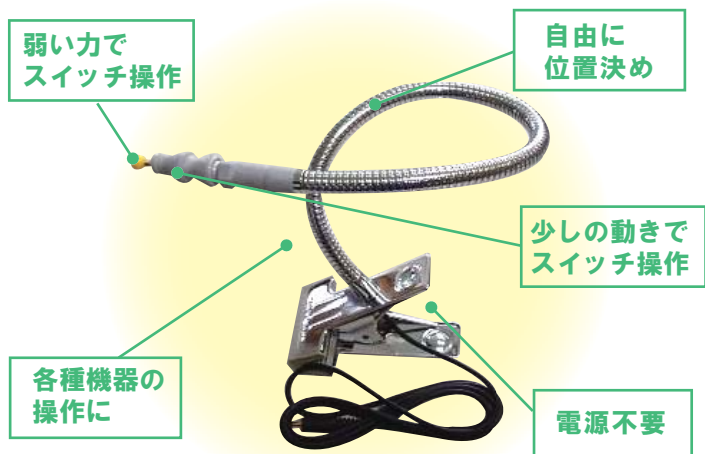

弱い力でスイッチ操作が可能

・先端を軽く傾けるだけでスイッチが入ります。

少しの動きでもスイッチ操作が可能

・頬や指などの少しの動きで使用できます。

自由に位置決め

・アーム部が自在に動かせるので、位置決めが自由にでき、設置・移設も簡単です。

電源が不要

・移動先や車椅子でも使えます

各種機器の操作スイッチとして

・ナースコールや各種コール機器、意思伝達装置などの操作スイッチとして使用できます

使用図

①車イスで使用




②ベッドで使用



③頬で操作




④指で操作

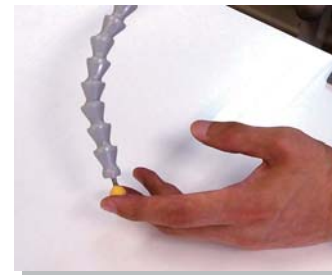


用途例

ナースコール・各種コール機器の操作スイッチに

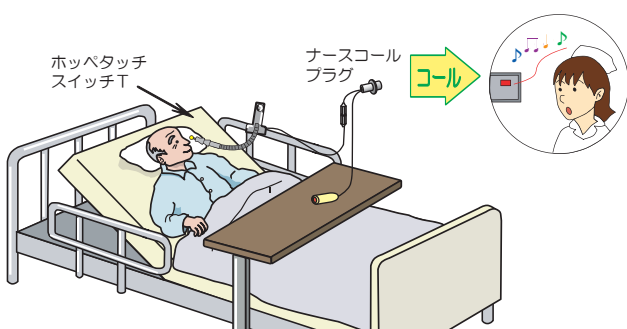

意思伝達装置や環境制御装置の操作スイッチに

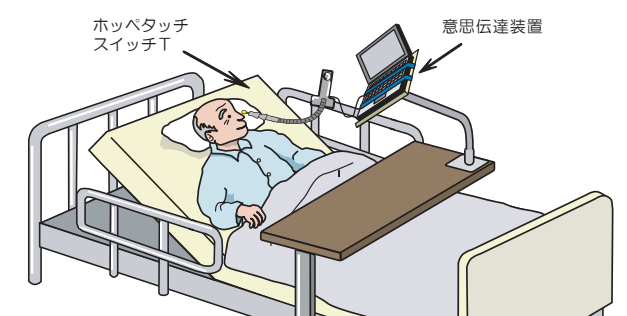

仕様

| | |
|---------|------------------------------------|
| 商品名 | 操作支援スイッチ「ホッペタッチスイッチT」 |
| 品番 | 00141A00 |
| 電源 | 不要 |
| 寸法 | フレキアーム部：500mm、コード：1.5m |
| 重量 | 400g |
| スイッチ作動力 | 倒す 約12g (0.12N) 押す 約90g (0.88N) |
| 接続口 | φ3.5モノラルプラグ |
| 価格 | 10,000円 (税抜) |

※商品改良のため、仕様および外観を予告なく変更する場合がありますので、ご了承下さい。

【販売店】

【製造販売元】

徳器技研工業株式会社

〈本社〉

〒879-0232 大分県宇佐市大根川318番地

TEL: 0978-33-5595 FAX: 0978-33-5596

MAIL: info@amor.co.jp HP: http://www.tokuki.net