


カフキーパー

カフ圧を自動的にキープして
安心の呼吸ケアを!!

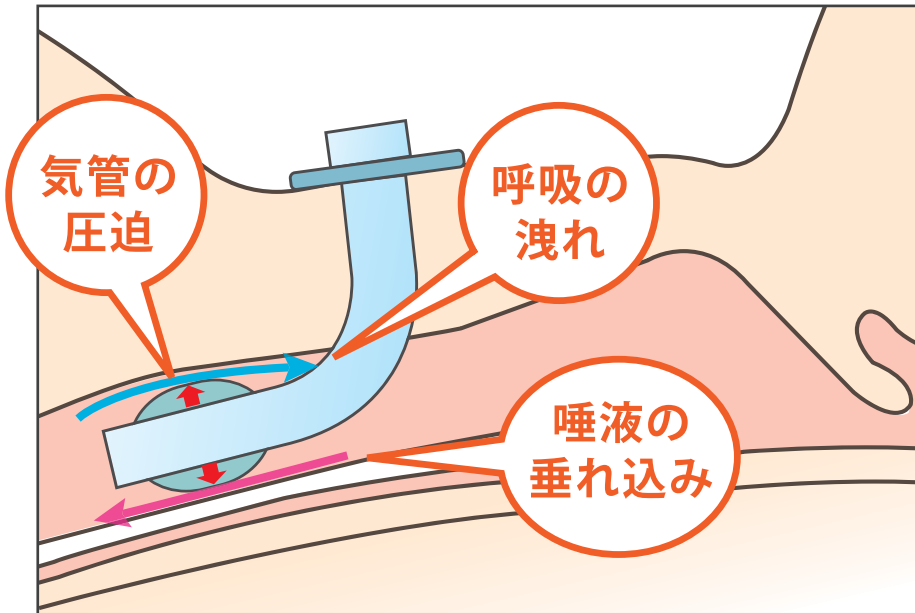

気管チューブの
カフ圧管理は
重要です

空気量で管理ですか？
パイロットバルーンの
硬さで管理ですか？

これからは
「カフ圧調整器」です

カフ圧を電源不要でベストキープします

電源不要で
カフ圧を調整保持

ジョグポンプで
設定が容易

プロテクトカバーで
機器を保護

異常低圧は
アラーム出力

取付金具付で
固定も確実

異常圧力開放弁で
機器を保護

開閉クランプで
圧力低下を防止

カフ圧自動調整器

カフキーパー

やさしさをカタチに

TOKUKI


カフ圧を自動的にキープして、安心の呼吸ケアを!!

カフ圧値を表示し、内蔵のバルンサーでカフ圧を自動調整します



- **電源不要でカフ圧を調整保持**
カフ圧を電源不要で自動調整し、適切なカフ圧を保持します。
- **ジョグポンプで設定が容易**
ジョグポンプ内蔵で、ポンプ駆動ハンドルを回してカフ圧を簡単にセットできます。
- **異常圧力開放弁で機器を保護**
異常圧力による機器の故障を防ぎます。
- **プロテクトカバーで機器を保護**
本体全体と圧力計に衝撃から守るカバーが付いて安心です。
- **取付金具(背面)付で固定も確実**
本体を人工呼吸器設置台等のフレームに固定できます。
- **開閉クランプで接続時の圧力低下を防止**
開閉クランプを閉じると接続時でも圧力低下を防ぎます。
- **エアー抜きの異常低圧はアラーム出力**
コール機器(別売)を接続しておくと、カフの破れ・チューブの外れ等でカフ圧が異常に低下した場合にコール出力します。

接続図

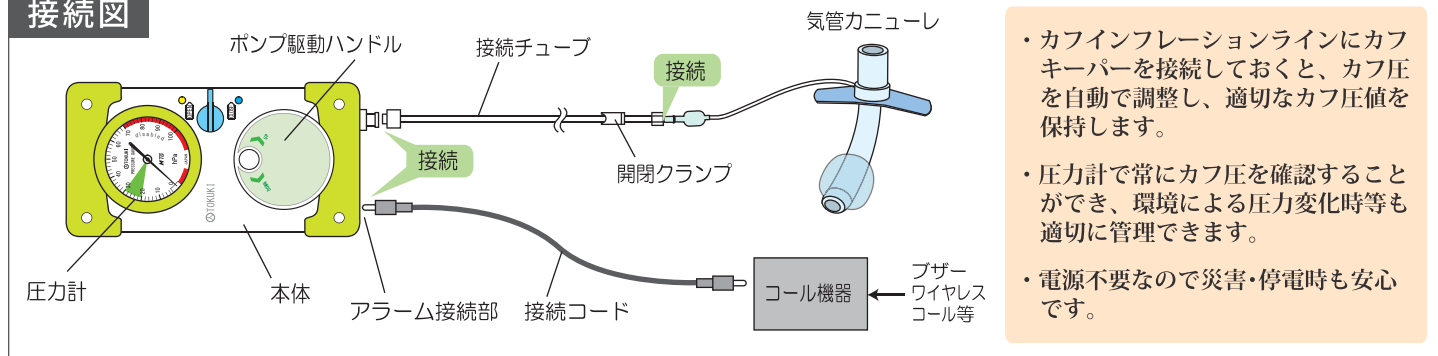

仕様

販売名	カフ圧自動調整器「カフキーパー」
商品番号	00170A00
医療機器区分	クラスI
医療機器届出番号	44B2X1000100170A
一般的名称	気管内チューブカフインフレータ
測定範囲	0~70hPa
電源	不要
本体寸法	W92×D78×H176(mm)
質量	490g

ご注意

- 本品は、医師および医師の指示を受けた医療従事者のみが使用してください。
- 本品は、大容量低圧カフ付き気管および気管切開チューブとのみ併用してください。
- 接続チューブは同一患者に対してのみ使用し、再使用禁止です。使用後は廃棄し、再滅菌したり再使用したりしないでください。

※製品改良のため、予告なく仕様および価格等を変更する場合がありますので、ご了承ください。

【販売店】

【製造販売元】

徳器技研工業株式会社

〈本社〉

〒879-0232 大分県宇佐市大根川 318 番地

TEL : 0978-33-5595 FAX : 0978-33-5596

MAIL : info@amor.co.jp HP : http://www.tokuki.net