


## カフチェッカー

カフ圧値を管理して  
安全・安心の呼吸ケアを!!

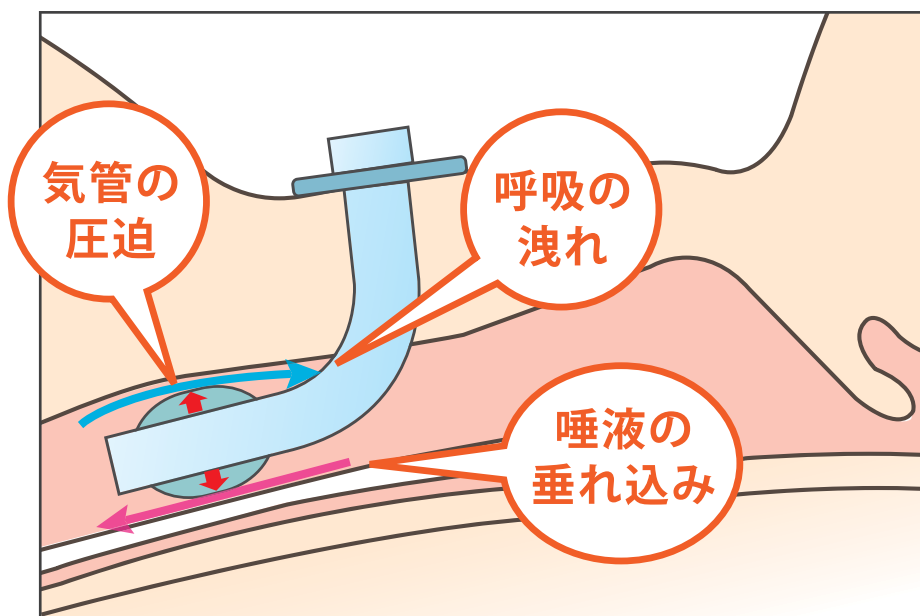

気管チューブの  
カフ圧管理は  
重要です

空気量で管理ですか？  
パイロットバルーンの  
硬さで管理ですか？

これからは  
「カフ圧値で管理」

カフ圧を見える管理でベストチェックします

見える管理

ストラップ付で  
携帯性良好

ジョグポンプで  
設定が容易

異常圧力開放弁で  
機器を保護

プロテクトカバーで  
機器を保護

開閉クランプで  
圧力低下を防止

# カフ圧調整器

やさしさをカタチに

## カフチェッカー

**TOKUKI**


カフ圧調整器で安全・安心の呼吸ケアを!!

カフ圧値を表示し、ジョグポンプで空気を充填・排出します



- カフ圧を見える管理で適切にカフ圧をモニターして管理できます。
- ジョグポンプで設定が容易  
ジョグポンプ内蔵で、ポンプ駆動ハンドルを回してカフ圧を簡単にセットできます。
- 異常圧力開放弁で機器を保護  
異常圧力による機器の故障を防ぎます。
- プロテクトカバーで機器を保護  
本体全体と圧力計に衝撃から守るカバーが付いて安心です。
- ストラップ付で携帯性良好  
携帯時や落下防止に便利なストラップを付属しています。
- 開閉クランプで接続時の圧力低下を防止  
開閉クランプを閉じると接続時でも圧力低下を防ぎます。

### 接続図

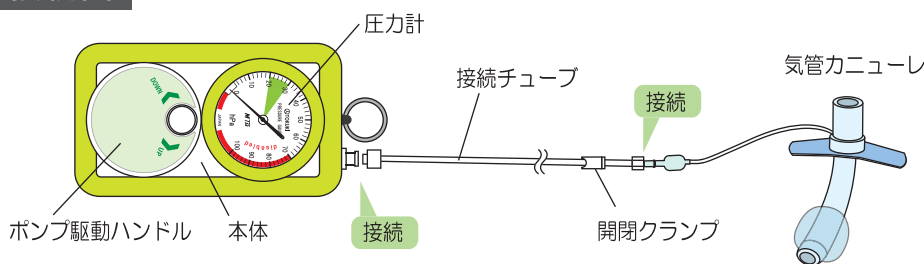

カフインフレーションラインにカフチェッカー接続してカフ圧をモニターし、随時適切に管理できます。

### 仕様

|          |                  |
|----------|------------------|
| 販売名      | カフ圧調整器「カフチェッカー」  |
| 商品番号     | 00177A00         |
| 医療機器区分   | クラスI             |
| 医療機器届出番号 | 44B2X1000100177A |
| 一般的名称    | 気管内チューブカフインフレーター |
| 測定範囲     | 0~70hPa          |
| 電源       | 不要               |
| 本体寸法     | W81×D53×H141(mm) |
| 質量       | 300g             |

### ご注意

- ・本品は、医師および医師の指示を受けた医療従事者のみが使用してください。
- ・本品は、大容量低圧カフ付き気管および気管切開チューブとのみ併用してください。
- ・接続チューブは同一患者に対してのみ使用し、再使用禁止です。使用後は廃棄し、再滅菌したり再使用したりしないでください。

※製品改良のため、予告なく仕様および価格等を変更する場合がありますので、ご了承ください。

### 【販売店】

### 【製造販売元】

## 徳器技研工業株式会社

〈本社〉

〒879-0232 大分県宇佐市大根川 318 番地

TEL : 0978-33-5595 FAX : 0978-33-5596

MAIL : info@amor.co.jp HP : http://www.tokuki.net