

離床センサーの一時停止タイマー

やさしさをカタチに

お世話タイマー

 TOKSO

トクソー技研株式会社

介助時に離床センサーの通報を一時停止し誤通報を防止します。
タイマー設定時間後に自動復帰するので、安心安全です。

タイマー設定ボタン

LEDランプ

リセットボタン

お世話タイマー

特長1 介助作業中にセンサーが一時停止して誤通報を防ぎます。

特長2 スイッチの入れ忘れを防止し安心して介助ができます。

特長3 タイマー設定時間は3分、5分、10分で設定できます。

特長4 ベッドサイドレールにフックを引っかけて固定、簡単に設置できます。

お世話タイマーで、
設定時間通報停止



マットを踏むと

コール

トクソー技研株式会社

お世話タイマー


やさしさをカタチに
TOKSO
トクソー技研株式会社

■使用方法

①タイマー設定ボタンを押します



②介助作業を行います。

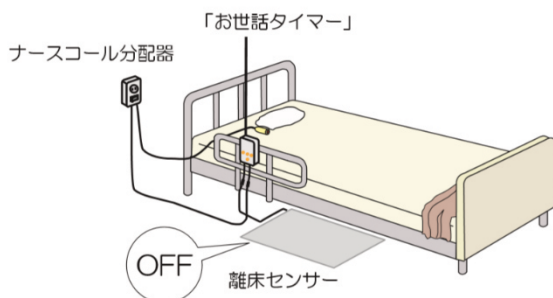

③設定時間経過後、離床センサーが動作します。



■使用例

■仕様

①有線式



②ワイヤレス式



商品名	お世話タイマー
品番	00222A00
外形寸法	幅69mm×長115mm×厚19.5mm
入力コード長さ	600mm
出力コード長さ	600mm
接続プラグ形状	Φ3.5
電源	単4形アルカリ乾電池×3本
設定時間	3分、5分、10分
質量	170g
価格	8,800円(税抜8,000円)

ご注意

- 出力コード、入力コードは無理に引っ張ったり・折り曲げたりしないでください。
- 電池切れの場合は「お世話タイマー」のランプは点灯しません。
乾電池(単4×3ヶ)を新品交換してください。
- 離床センサーの接続プラグ形状を必ずご確認ください。

※製品改良のため、予告なく仕様および価格等を変更する場合がありますので、ご了承ください。

製造元

トクソー技研株式会社
〒879-0232
大分県宇佐市大根川318番地
TEL 0978-33-5595
URL <http://www.tokso.net>

販売元