


離床や徘徊をすばやく通報して事故を防止します！

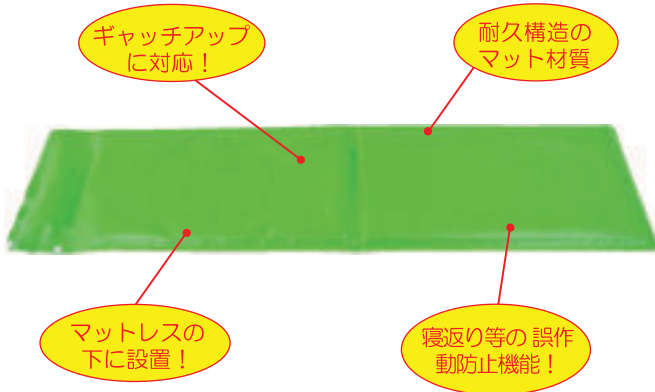


**特長**

- **折りたたみ構造**  
2つに折りたたみできますので持ち運び保管が便利です。
- **マットレスの下に置くのでスッキリ**  
ゴウゴウ感がなくてスッキリとした感触です。
- **遅延タイマーで誤作動防止**  
寝返り等の誤作動を防止します。
- **起き上がりやベッド上の移動をすばやく検知**  
頭部に置けば起き上がりを素早く検知します。  
腰部に置くとベッド上の移動を素早く検知します。

【注】本品はナースコール接続やワイヤレスコール接続が別途必要です。

**用途例**


- **ベッドからの起き上がり (早期検知で転倒防止)**
- **端座位になったとき (早期徘徊防止)**
- **ベッドの両側から出る人 (ふむナール対応不可の時)**
- **ベッドから出る人 (早期検知で転倒防止)**

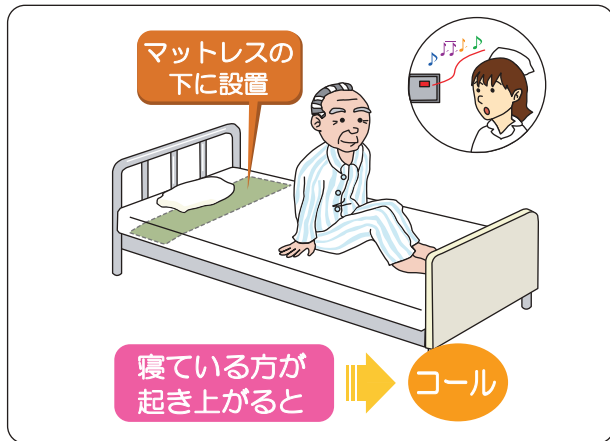

マットレスの下の枕下部分や腰部分に置きます。

センサーマットから離れると「起き上がり」や「離床」を離れた場所の介護者にすぐにお知らせします。

**使用例**

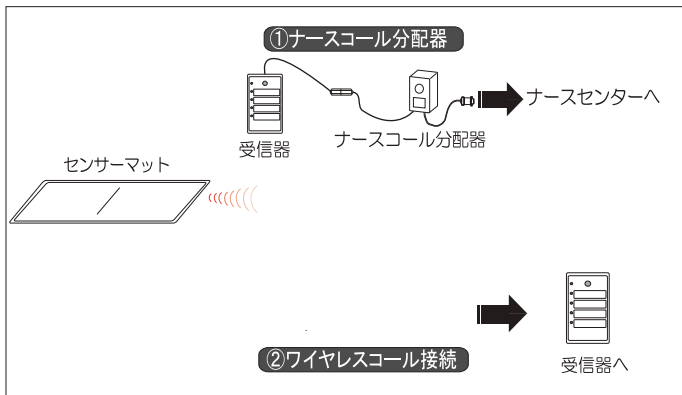

※ナースセンターへの接続は、ナースコール分配器が別途必要です。ナースコールコネクタの形状をご確認ください。

※商品改良のため、仕様および外観を予告なく変更する場合がありますので、ご了承下さい。

**仕様**

品名	離床センサー「おきナールTW2エア」
品番	00138C00
電源	送信器：ボタン電池（DC3V）
検知方式	マットから離れると検知して通報
防水性	防水構造
構成	センサーマット
通報方式	①ナースコール分配器 (別途費用) ②ワイヤレスコール
外形寸法	幅220×長900×厚5mm
質量	センサーマット700g
価格	55,000円（税抜50,000円）

JANコード 4560346575663

**【お問い合わせ先】**

一 医療福祉に技術で貢献する一  
トクソー技研株式会社

◇本社・工場  
〒879-0232 大分県宇佐市大根川318番地  
TEL 0978-33-5595 FAX 0978-33-5596  
MAIL info@amor.co.jp HP http://tokso.net/  
00138P00 2020.10