


起上りや危険動作をすばやく通報して事故を防止します！



【特長】

- 対象者のいろいろな動きをひもで確実に検知して通報します
- マグネットで簡単セット
壊れにくくセットが簡単です
- クリップを衣類等に取付けると本人が動いた時に通報します
- 本体はクランプで確実に固定できます
- ナースコール・ワイヤレスコール・チャイム音で通報します

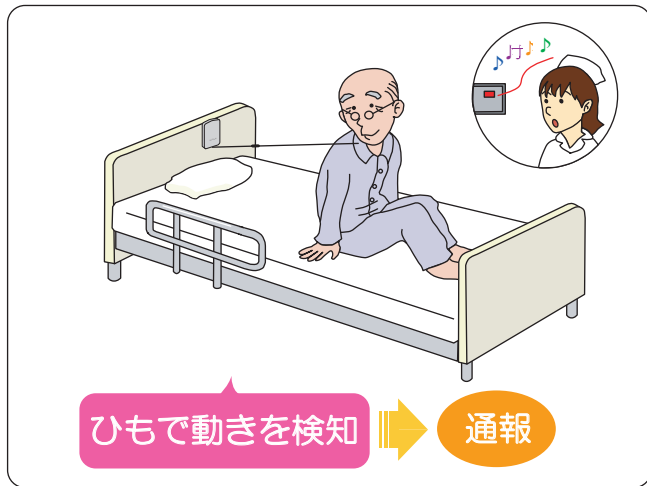


ひもを襟元・肩口・袖・足元に取付けて使用




ひもで動きを検知して、離れた場所の介護者にお知らせします。

用途例


- 車イスからの立ち上がり（早期転倒防止）

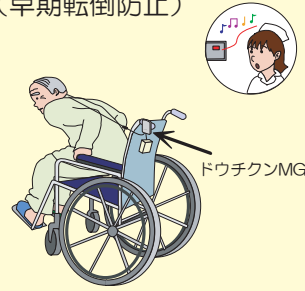


- 食堂での立ち上がり（早期転倒防止）

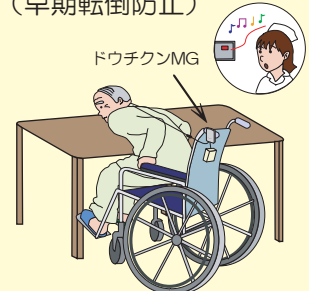


- ベッド上の寝返り、身体移動（姿勢・トラブル防止）

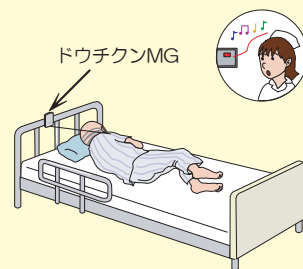


- 手・足の動作（点滴等の抜取防止）

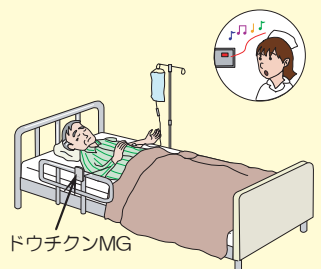


使用例

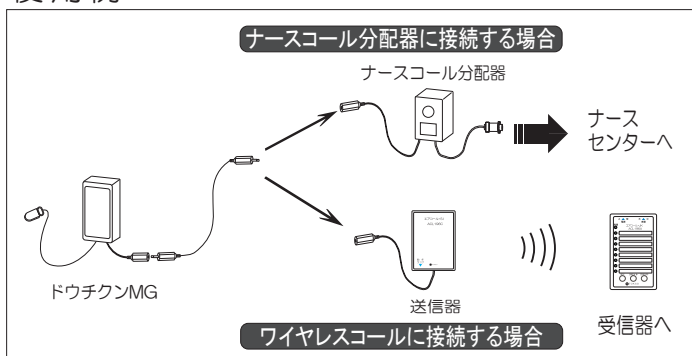

- ベッドからの起き上がり（早期転倒防止）

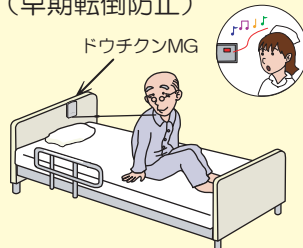

- 車イスへの移乗（早期転倒防止）

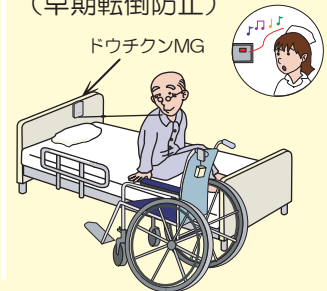

※ナースセンターへの接続は、ナースコール分配器が必要です。ナースコールコネクタの形状をご確認ください。

※ワイヤレスコールタイプ「ドウチクンMGエア」もあります。詳しくは裏面をご覧ください。

離床センサー「ドウチクンMG」

ドウチクンMG（有線式）



- ①対象者のいろいろな動きをヒモで確実に検知します。
- ②ヒモが引っ張られると通報します。更に引っ張られるとマグネット部が分離します。
- ③本体の固定もクランプ式でしっかり固定が出来ます。

※ナースコール分配器は、ナースコールのメーカー、品番、コネクタ形状等のご確認が必要となります。詳しくは弊社HP（本紙下部記載）をご覧ください。
※その他、ナースコール分配器の代わりに「オスッチン」（別売品）も組み合わせが出来ます。

商品名	ドウチクンMG
品番	00198C00
通信方式	ナースコール（ナースコール分配器） ワイヤレスコール（エアコールSI+エアコールJK）
電源	不要
防水性	なし
外形寸法	幅66mm×長91mm×高25mm
質量	240g
JANコード	4560346576547

ドウチクンMGエア（無線式：コードレスタイプ）




- ①コードがないので、スッキリ・安全に設置ができます。
- ②電波到達距離は、30～70mです。
- ③本体の固定もクランプ式でしっかり固定が出来ます。

※本商品はエアコールシリーズの受信器とセットで使用します。
詳しくは弊社HP（本紙下部記載）をご覧ください。
※本商品をご使用になる場合は、使用環境をご確認の上、適切にご利用ください。

商品名	ドウチクンMGエア
品番	00198D00
通信方式	ナースコール（エアコールJO+ナースコール分配器） ワイヤレスコール（エアコールJK）
電源	単4アルカリ乾電池×2本
防水性	なし
外形寸法	幅66mm×長91mm×高25mm
質量	240g
JANコード	4560346576554

ドウチクンMGチャイム（チャイム音通報）

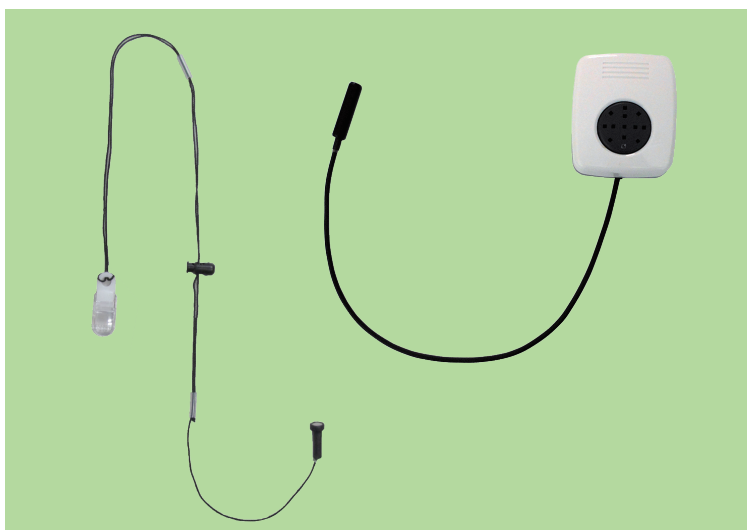

- ①チャイム音がその場で鳴るのですぐに確認が出来ます。
- ②集会室や食堂等の多くの人がいる場所で、車いすからの立ち上がりトラブルの早期確認ができます。

商品名	ドウチクンMGチャイム
品番	00198E00
通信方式	チャイム音通報
電源	単3アルカリ乾電池×2本
防水性	なし
外形寸法	幅69mm×長83mm×高31mm
質量	70g
JANコード	4560346576561

※本商品の検知ひものマグネットがペースメーカーなどの医療機器の正常な動作を損なう恐れがあります。ご注意ください。
※商品改良のため、仕様および外観を予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

【お問い合わせ先】

— 医療福祉に技術で貢献する —

トクソー技研(株)

◇本社・工場

〒879-0232 大分県宇佐市大根川318番地

MAIL info@amor.co.jp HP <http://tokso.net/>

2023.12